



The choice of millions
of dentists worldwide

+ Info



AP-B Escalador ultrasónico + Aeropulidor

LA INVERSIÓN MÁS RENTABLE

Solución combinada y completa para una profilaxis perfecta.

Limpieza más rápida y eficiente

Estructura de conductos optimizada

- Nuevo diseño aerodinámico
- Reduce la pérdida de presión del fluido
- Elimina eficazmente la placa bacteriana y el pigmento



Evidenciando la placa bacteriana



Eliminando la placa bacteriana



Después de eliminar la placa bacteriana

Polvo de Bicarbonato y Glicina

- El tamaño promedio de las partículas de Polvo de Bicarbonato es de 65 micras, hace que la dureza sea menor que la del esmalte, por lo que no daña los dientes.
- Contiene esencia natural derivada de plantas que ofrece un sabor más agradable.
- El bicarbonato es resistente al agua para evitar que el polvo húmedo bloquee el dispositivo.
- Polvo de Glicina de odontología especialmente recomendado para tratamientos subgingivales, mantenimiento de implantes, perio y limpieza.




Dientes	Dureza (Moh)
Enamel	4-5
Dentina	2-2.5
Cemento	2-4

Polvo	Dureza (Moh)
Bicarbonato de sodio	2.5
Glicina	2
Carbonato de calcio	3
Hidróxido de aluminio	3

DOS EN UNO: MODO SUPRAGINGIVAL Y SUBGINGIVAL

Pieza de mano con diseño de tres secciones

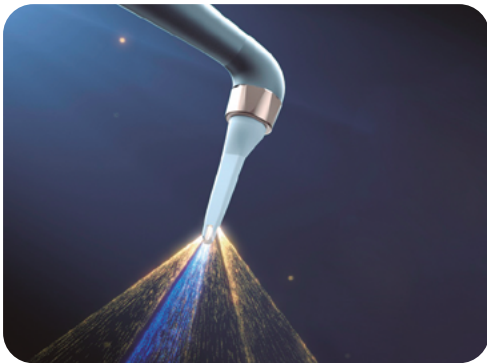

- Boquilla subgingival de polímeros médicos
- 360° giratorio
- Flexible
- Salida de polvo en tres direcciones
- Salida de agua unidireccional
- Eliminación completa de la placa
- Gran accesibilidad

DISEÑO OPTIMIZADO

Tanque de polvo en forma de embudo transparente

Lo que permite ver en tiempo real del flujo de polvo en el tanque.

Salida de polvo estable con rotación de 360°

Compacto y ligero

La unidad principal pesa sólo 2 kg.

Diseño de base que ahorra espacio



AP-B

**DESTÁCATE
DE LA MULTITUD**

DISEÑO INNOVADOR

**SOLUCIÓN COMBINADA
Y COMPLETA PARA UNA
PROFILAXIS PERFECTA**

**LA INVERSIÓN
MÁS RENTABLE**





Escalado ultrasónico de alto rendimiento

- Complemento de limpieza dental eficiente y de alta calidad.
- Fácil eliminación de grandes trozos de cálculo.
- Pieza de mano ultrasónica desmontable y esterilizable en autoclave.


Identificación automática del modo de escalado

Selección automática en función de la pieza de mano que se levante del soporte.



Modo Aero pulidor

Levante la pieza de mano del aeropulidor para accionar automáticamente este modo.



Modo Escalador ultrasónico

Levante la pieza de mano ultrasónica para accionar automáticamente el modo de escalado ultrasónico.

Unidad principal 1 unidad	Polvo de bicarbonato de sodio supragingival de 65 µm 1 botella
Pedal 1 pieza	Polvo de glicina supragingival de 25 µm 1 botella
Adaptador de corriente (cable de alimentación incluido) 1 pieza	Boquilla subgingival 10 piezas
Pieza de mano ultrasónica (HW-5L) 1 pieza	Llave de boquilla 1 pieza
Pieza de mano de pulido por aire supragingival (AP-1) 1 pieza	Caja de esterilización 2 piezas
Pieza de mano de pulido por aire subgingival (AP-2) 1 pieza	Botella de agua de 1400 mL 1 pieza
Tips P1×2 P3×1 P8×1 G1×1 G4×1	Botella de agua cónica de 700 mL 1 pieza
1# Llave dinamométrica 1 pieza	Agujas (largas y cortas) 1 kit
Tanque de polvo supragingival 1 pieza	Unión T 1 pieza
Tanque de polvo subgingival 1 pieza	Conector macho y hembra 1 par
Conector de tubo de aire 1 pieza	



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech
Zone, Guilin Guangxi, 541004 P. R. China

RUMAR
mayorista dental

**Importador mayorista Woodpecker / DTE
para España y Portugal**

RUMAR Cedeira S.L.

C. del Obispo Golfín, 11, Bajo A, 28430 Alpedrete, Madrid

Tlfno.: 91 849 01 04

Tlfmo. móvil / Whatsapp: +34 626 327 863

¡Siempre en Stock! Entrega en 24 horas.

Dispositivos, accesorios, repuestos y servicio postventa

Su distribuidor de confianza: