

DTE®

La elección de millones
de dentistas del mundo

D600

Ultrasonidos de Sobremesa

Agradable & Eficiente



Salida de potencia inteligente
Experimenta un tratamiento sin dolor

Experto en endodoncia ultrasónica

Preparación rápida, localización del orificio del conducto, extracción de cuerpos extraños en el conducto radicular, irrigación endodóntica, retratamiento del conducto, escalado supragingival y tratamiento periodontal.

Compatible con más de 70 puntas DTE. Pieza de mano metálica con LED, autoclavable.

ED3D

Modificación de la actividad pulpar



ED12D

Localización del orificio del tratamiento de conducto

ED62

Irrigación mínimamente invasiva




ED6

Extracción de fracturas

Conducción por onda sinusoidal

Evita la estimulación provocada por la salida instantánea de corriente. Proporciona un tratamiento cómodo para los pacientes. Ofrece una experiencia de escalado suave.

Salida de potencia suave con onda sinusoidal del D600.

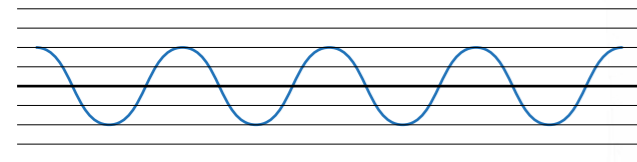

Configuración alta

GD5	GD12	PD4	PD7	PD12	ED60	ED66
x2	x2	x2	x2	x2	x2	x2

Configuración estándar

GD5	GD12	PD4	PD7	PD12	ED60	ED66
x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1

Nota: Woodpecker se reserva el derecho de modificar la configuración de las puntas sin previo aviso.



Retroalimentación inteligente degenerativa

Preparación rápida, localización del orificio del conducto, extracción de cuerpos extraños en el conducto radicular, irrigación endodóntica, retratamiento del conducto, escalado supragingival y tratamiento periodontal.

Compatible con más de 70 puntas DTE. Pieza de mano metálica con LED, autoclavable.

Sistema táctil inteligente

- Pantalla de panel de control clara.
- Control táctil ultrasensible.
- Diseño impermeable.



Sistema automático de suministro de agua

Se pueden utilizar soluciones como hipoclorito de sodio, clorhexidina, peróxido de hidrógeno y solución salina. Fácil cambio de agua; el diseño de doble conducto elimina pasos innecesarios. La marca clara de 50 ml facilita la preparación de soluciones.




Pieza de mano LED desmontable

La pieza de mano con LED utiliza la última técnica de sellado y puede ser autoclavable. Los pacientes se sienten más cómodos durante el tratamiento.



Visión clara
D600 con luz LED

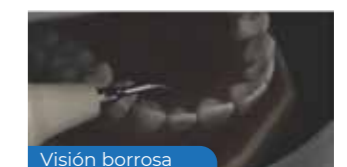

Visión borrosa
D600 sin luz

Escalado supragingival



GD4 GD5 GD6 GD12

Mantenimiento de implantes



PD90 PD40 PD41 PD42

Escalado subgingival



PD1 PD3 PD4 PD3D PD7 PD12 PD2R PD2L

Tratamiento de conductos

Irrigación endodántica



ED62 ED60 ED66

Para la eliminación de calcificación y rellenos defectuosos en el conducto



ED3D

Para la eliminación de calcificación en el orificio del conducto y en el tercio superior del conducto



ED4D

Retratamiento de conductos Extracción de cuerpos extraños



ED6 ED7

Material especial (ED6, ED7). Delgado, flexible, con buena conductividad para ultrasonido.

Para la extracción de cuerpos extraños en el tercio inferior del conducto

Para la extracción de cuerpos extraños en el tercio superior del conducto

Para la extracción de cuerpos extraños y fracturas de instrumentos (acero inoxidable) en el conducto

Para la eliminación de cemento temporal y fracturas (acero inoxidable) en el conducto



ED14

ED15

Localizar el orificio del conducto radicular



ED12D

Cabeza recubierta de diamante. Localiza el orificio del conducto radicular con seguridad, precisión y eficiencia.

Preparación de la cavidad



GD30

Para la preparación entre fosas y fisuras



GD31

Para la preparación de cavidades mesiooclusales



GD32

Para la preparación de cavidades distales



GD30

GD31

GD32

SBD1

SBD2

SBD3



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech
Zone, Guilin Guangxi, 541004 P. R. China

Importador mayorista Woodpecker / DTE
para España y Portugal

RUMAR Cedeira S.L.

C. del Obispo Golfín, 11, Bajo A, 28430 Alpedrete, Madrid
Tlfno.: 91 849 01 04

Tlfmo. móvil / Whatsapp: +34 626 327 863

¡Siempre en Stock! Entrega en 24 horas.

Dispositivos, accesorios, repuestos y servicio postventa

Su distribuidor de confianza:

RUMAR
mayorista dental